

Załącznik

Mikrodermabrazja diamentowa

Mikrodermabrazja to peeling mechaniczny polegający na stopniowym złuszczeniu naskórka, przy pomocy urządzenia posiadającego specjalne głowice ścierające. Górne warstwy obumarłego naskórka zostają usunięte, wskutek czego powstają nowe, zregenerowane komórki. Po wykonaniu zabiegu skóra jest idealnie gładka.

Wyposażenie aparatu

Komplet głowic diamentowych, gumowy wężyk do głowic, kabel zasilający, pedał.

Dane techniczne

Pompa tłokowa z płynnie regulowanym podciśnieniem pracy od 0 do 0,4 bar.

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania

Aparat jest zasilany napięciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, mogą spowodować uszkodzenie aparatu oraz powstanie pożaru. Urządzenie musi być uziemione.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć porażenia prądem lub wywołania pożaru, nie wolno wystawiać sprzętu na działanie wody i należy chronić go przed wilgocią. Nie wolno umieszczać sprzętu w miejscach narażających go na zroszenie.

UWAGA! Przed zabiegiem zapytaj czy osoba nie jest uczulona na nikiel, chrom, złoto. W przeciwnym razie nie wykonuj zabiegu.

Przygotowanie urządzenia do pracy


1. Ustaw aparat na płaskiej stabilnej powierzchni.
2. Podłącz przewód sieciowy do aparatu i gniazdka sieciowego.
3. Zamontuj wybraną końcówkę na manipulator.
4. Włącz aparat przyciskiem z tyłu.
6. Ustaw właściwą siłę ssania
7. Aparat jest gotowy do pracy.

Kroki do rozpoczęcia pracy urządzenia

Istnieją dwa sposoby ustawiania funkcji:

1. Szybki – z automatycznym ustawieniem parametrów.

1.1. Klawiszem sterującym wybierz funkcję mikrodermabrazja i naciśnij start. Następuje rozpoczęcie zabiegu.

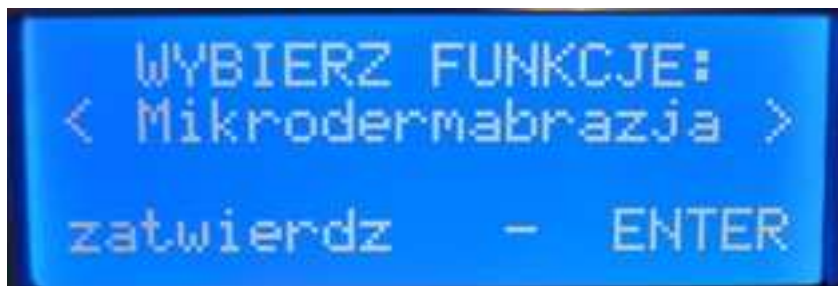


2. Ręczne ustawienie parametrów.

2.1. Klawiszem sterującym wybierz funkcję mikrodermabrazja i zatwierdź klawiszem menu.

2.2. Klawiszem sterującym ustaw czas - zatwierdź klawiszem menu.



2.3. Ekran roboczy.

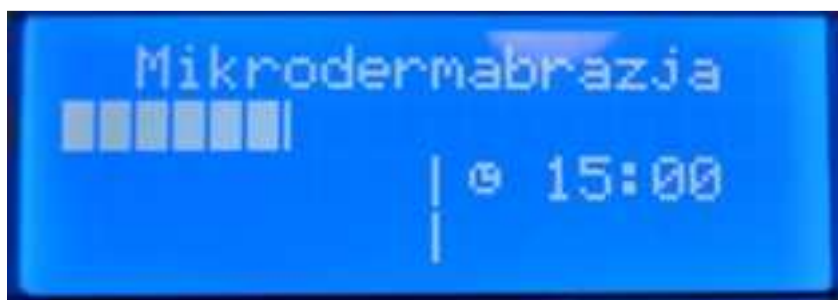

2.4. W celu rozpoczęcia zabiegu naciśnij start.

W dowolnym momencie możesz przerwać zabieg włączając klawisz stop. Zegar zatrzyma się, a po ponownym włączeniu start możesz kontynuować pracę bez konieczności regulacji parametrów.

W trakcie trwania zabiegu klawiszami sterującymi możesz regulować wysokość podciśnienia.

Konserwacja urządzenia

Z chwilą kiedy urządzenie przestaje prawidłowo zasysać powietrze należy wymienić filtr na nowy. W tym celu wyciągnij filtr znajdujący się z tyłu kombajnu i włóż nowy.



Jeżeli w Twoim kombajnie zawiera funkcję dermomasagera filtr mikrodermabrazji należy czyścić wg opisu czyszczenia filtra dermomasagera.

Przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazda sieciowego. Obudowę można czyścić nawilżoną szmatką, uważając by woda nie dostała się do wnętrza.